

SEPARÉ MODULARE SILENTIA



Privacy, igiene e design: Silentia, l'alternativa!





Abbiamo definito lo standard nel 1990. Ad oggi, abbiamo venduto più di 100.000 separé.

Silentia offre una soluzione completa per creare ambienti riservati nelle strutture sanitarie. Poiché i vari separé modulari sono compatibili tra loro e dotati di EasyClick, è possibile trasferire facilmente un separé dalla parete al carrello, oppure combinare un modello fisso con uno pieghevole, per sfruttare al massimo le opportunità offerte.

Igiene imbattibile con EasyClean™

Il separé ha superfici lisce e resistenti ai disinfettanti utilizzati nel settore sanitario. Le ruote rivestite si smontano facilmente e sono lavabili in lavastoviglie. I prodotti EasyClean soddisfano rigidi requisiti igienici e tutte le superfici sono facilmente accessibili per la pulizia.

Facilissimo da ripiegare con una sola mano – EasyReturn™

Le cerniere brevettate con *funzione di memoria incorporata* semplificano l'apertura e la chiusura e contribuiscono a prevenire il rischio di infezioni incrociate grazie ad un unico punto di contatto, cioè l'impugnatura ergonomica.

Fisso o mobile: cambiare è facile con EasyClick™

La manovrabilità è a portata di clic. Un separé a parete può anche essere fissato su un carrello per applicazioni mobili o su altre unità del sistema. Un sistema completo dalle possibilità illimitate, facile da usare in tutti i reparti.

- I nostri prodotti sono disponibili in lunghezze e altezze differenti, nell'ambito di un sistema adattabile alle vostre esigenze specifiche.
- La struttura leggera semplifica l'uso, ottimizzando stabilità e sicurezza (< 5 kg/m²).
- Prodotti in materiali riciclabili.
- Sezioni realizzate in profili di laminato pressato oppure policarbonato, resistenti ai disinfettanti utilizzati in ambito sanitario.

EasyClean



EasyClean



EasyReturn



EasyClick





Separé pieghevoli

“Semplicità” è una delle parole chiave nello sviluppo dei nostri prodotti. Deve essere facile proteggere i pazienti da sguardi indiscreti per offrire loro un momento di privacy. Inoltre, deve essere facile modificare ed espandere il sistema, motivo per cui tutti i componenti sono progettati per essere compatibili tra loro.

VERSIONE STANDARD – MONTAGGIO DIRETTO A PARETE

L'attacco a parete semplifica il montaggio. Montaggio del separé con EasyClick.

Il pannello ha una larghezza di soli 25 cm e permette di risparmiare spazio prezioso, senza compromettere la privacy del paziente.



CARRELLO PER SEPARÉ

Accessorio per separé pieghevoli. Montaggio del separé con EasyClick.

La struttura delle ruote occupa uno spazio minimo.



MONTANTE PER MONTAGGIO A PAVIMENTO

Da ancorare al pavimento. Si utilizza per montare il separé in posizione indipendente. Montaggio del separé con EasyClick.



MONTAGGIO A PARETE CON DISTANZIALE

Si utilizza per fissare il separé a una determinata distanza dalla parete, ad es. per lasciare lo spazio per un pannello per terapie. Montaggio del separé con EasyClick.



MONTAGGIO SULLA GUIDA PER TERAPIA INTENSIVA

Il morsetto si utilizza per fissare il separé alla guida per terapia intensiva al fine di consentirne lo spostamento laterale. Per i separé più lunghi di 2,25 m si utilizzano due guide. Montaggio del separé con EasyClick.





Separé mobili pieghevoli

MONTAGGIO SU CARRELLO

Fissando il separé su un carrello si ottiene velocemente un elemento di riparo mobile. Questo carrello è adatto a separé pieghevoli di varie lunghezze, da 5 a 15 sezioni. Altezza: 1,45 m, 1,65 m o 1,85 m. Il design brevettato riduce al minimo l'ingombro a pavimento ed assicura la massima stabilità.







Separé mobili per testiera



SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 1,5 M

Protegge dagli sguardi indiscreti ai piedi del letto o negli spazi adibiti a spogliatoio. Larghezza (aperto): 1,5 m. Altezza: 1,55 m e 1,85 m. Il design brevettato richiede il minimo spazio a pavimento pur assicurando la massima stabilità.

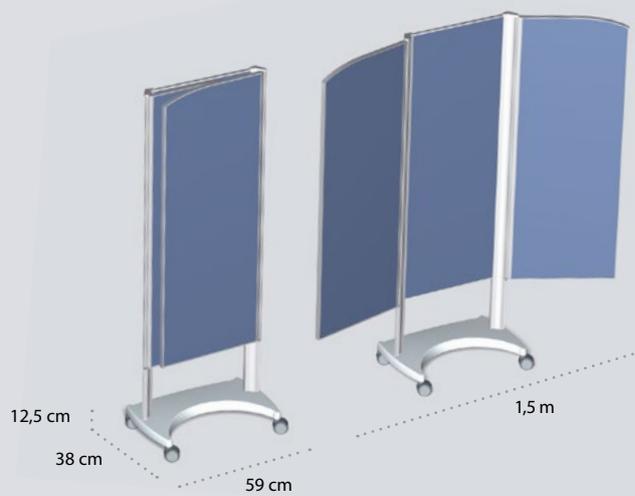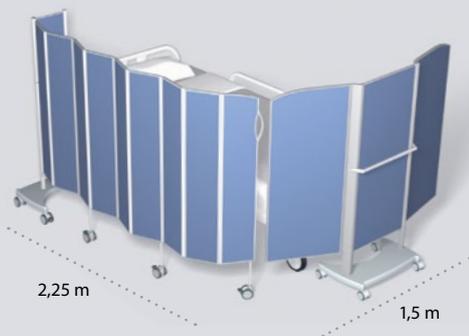

SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 2,0 M

Nuovo separé a montante ideale per gli ambienti che richiedono un elemento di riparo più permanente. Larghezza (aperto): 2,0 m. Altezza: 1,55 m e 1,85 m.

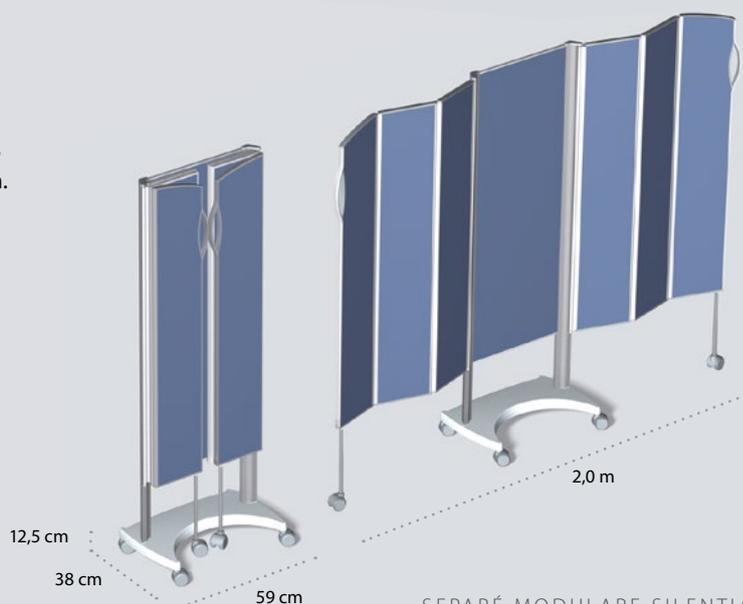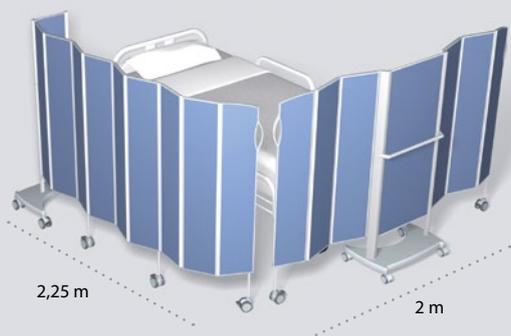



Separé fissi


Il nostro separé fisso è sviluppato per gli ambienti che richiedono un elemento di riparo permanente. Questo sistema offre anche diverse possibilità di allestimento, ad es. è possibile combinare un separé fisso fra i letti con un separé pieghevole apribile ai piedi del letto. Inoltre, il separé fisso consente di creare cabine-spogliatoio e altri tipi di "stanza nella stanza" senza intervenire sulle pareti.

MISURE STANDARD

LUNGHEZZA	ALTEZZA	PESO	COD. COLORATO	COD. DAYLIGHT TOP	COD. DAYLIGHT TOP DUO	COD. DAYLIGHT	COD. DAYLIGHT DUO
1,3 m	1,45 m	6,2 kg	6150	6150-DT	Non disponibile	6150-D	Non disponibile
1,3 m	1,65 m	7,2 kg	6250	6250-DT		6250-D	
1,3 m	1,85 m	8,3 kg	6350	6350-DT		6350-D	
2,4 m	1,45 m	11,4 kg	6155	6155-DT	6155-DTD	6155-D	6155-DD
2,4 m	1,65 m	13,3 kg	6255	6255-DT	6255-DTD	6255-D	6255-DD
2,4 m	1,85 m	15,3 kg	6355	6355-DT	6355-DTD	6355-D	6355-DD



DAYLIGHT, FISSO

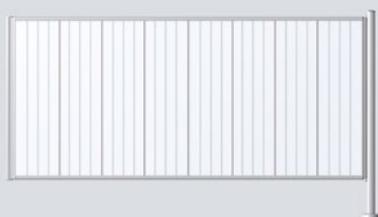

DAYLIGHT TOP DUO, FISSO




DAYLIGHT DUO, FISSO



SEPARÉ COLORATO, FISSO



DAYLIGHT TOP, FISSO

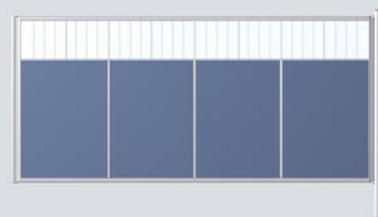



I montanti a pavimento consentono di creare un passaggio di servizio dietro la testiera del letto.



MONTAGGIO A PAVIMENTO SILENTIA


Per montare il separé fisso con EasyClick si utilizza un montante a pavimento in versione base (A). Per utilizzare il montante come punto di attacco per altri separé fissi o pieghevoli, si deve scegliere una delle altre versioni (B-D), che presentano fino a 4 punti di attacco.

In genere, il montante si ancora al pavimento per assicurare la massima stabilità. Questo è particolarmente importante se è utilizzato come punto di attacco per almeno un altro separé. Se è utilizzato solo come supporto per un separé fissato a parete, è sufficiente appoggiarlo al pavimento senza ancorarlo.

MISURE STANDARD DEI MONTANTI A PAVIMENTO

ALTEZZA	PESO	COD.	COD.	COD.	COD.
1,45 m	3,3 kg	6561-A	6561-B	6561-C	6561-D
1,65 m	3,5 kg	6562-A	6562-B	6562-C	6562-D
1,85 m	3,8 kg	6563-A	6563-B	6563-C	6563-D

Tipi di attacco del montante a pavimento, visti dall'alto.

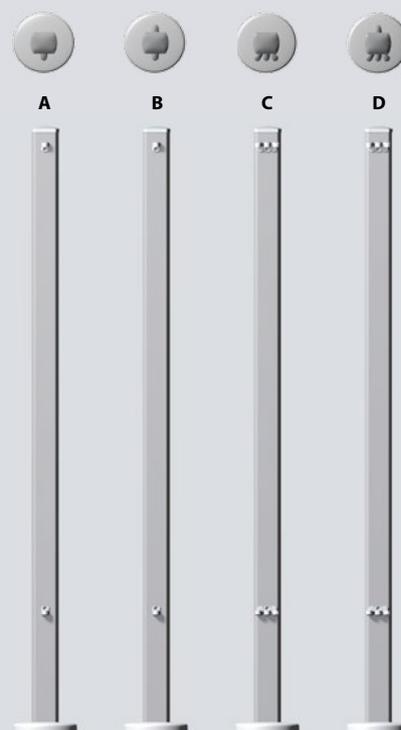

Il montante e la copertura della base del montante sono estremamente eleganti e prevedono una superficie liscia facile da pulire.

PROLUNGA PER SEPARÉ

Allontana dalla parete il punto di attacco del separé pieghevole, ad es. per lasciare spazio a un comodino o aumentare la lunghezza del separé. Disponibile in quattro lunghezze e tre altezze.



ALTEZZA	COD. LUNGHEZZA 0,5 M	COD. LUNGHEZZA 0,75 M	COD. LUNGHEZZA 1,0 M	COD. LUNGHEZZA 1,2 M
1,45 m	6162	6163	6164	6165
1,65 m	6262	6263	6264	6265
1,85 m	6362	6363	6364	6365

Separé pieghevoli Silentia

MISURE STANDARD

NUMERO DI SEZIONI	COD. COLORATO	COD. DAYLIGHT TOP	COD. DAYLIGHT DUO	COD. DAYLIGHT	LUNGHEZZA	ALTEZZA	PESO	MISURE RIPIEGATO	
								LARGHEZZA	PROFONDITÀ
5	6105	6105-DT	6105-DD	6105-D	1,25 m	1,45 m	8,0 kg	0,25 m	0,10 m
	6205	6205-DT	6205-DD	6205-D	1,25 m	1,65 m	9,5 kg	0,25 m	0,10 m
	6305	6305-DT	6305-DD	6305-D	1,25 m	1,85 m	11,5 kg	0,25 m	0,10 m
7	6107	6107-DT	6107-DD	6107-D	1,75 m	1,45 m	12,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6207	6207-DT	6207-DD	6207-D	1,75 m	1,65 m	14,0 kg	0,25 m	0,14 m
	6307	6307-DT	6307-DD	6307-D	1,75 m	1,85 m	16,0 kg	0,25 m	0,14 m
9	6109	6109-DT	6109-DD	6109-D	2,25 m	1,45 m	15,5 kg	0,25 m	0,18 m
	6209	6209-DT	6209-DD	6209-D	2,25 m	1,65 m	18,0 kg	0,25 m	0,18 m
	6309	6309-DT	6309-DD	6309-D	2,25 m	1,85 m	20,5 kg	0,25 m	0,18 m
11	6111	6111-DT	6111-DD	6111-D	2,75 m	1,45 m	18,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6211	6211-DT	6211-DD	6211-D	2,75 m	1,65 m	21,5 kg	0,25 m	0,22 m
	6311	6311-DT	6311-DD	6311-D	2,75 m	1,85 m	24,5 kg	0,25 m	0,22 m
13	6113	6113-DT	6113-DD	Non disponibile	3,25 m	1,45 m	22,0 kg	0,25 m	0,26 m
	6213	6213-DT	6213-DD		3,25 m	1,65 m	25,5 kg	0,25 m	0,26 m
	6313	6313-DT	6313-DD		3,25 m	1,85 m	29,0 kg	0,25 m	0,26 m
15	6115	6115-DT	6115-DD	Non disponibile	3,75 m	1,45 m	25,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6215	6215-DT	6215-DD		3,75 m	1,65 m	29,5 kg	0,25 m	0,30 m
	6315	6315-DT	6315-DD		3,75 m	1,85 m	33,5 kg	0,25 m	0,30 m

In tabella sono riportate le nostre misure standard, arrotondate a 0,5 m. Il separé è disponibile anche con lunghezza arrotondata a 0,25 m se la lunghezza totale è compresa fra 0,75 m e 3,75 m. Le altezze standard 1,45 m, 1,65 m e 1,85 m possono essere ridotte di 0,1 m regolando i piedini delle ruote. L'altezza dei piedini delle ruote deve essere indicata all'ordinazione. **Nota:** I separé più lunghi (12–15 sezioni) sono progettati per essere disposti a L intorno al letto.



SCELTA DELL'ATTACCO ADATTO PER IL TELAIO DI UNA PORTA

(A) In genere, l'attacco del separé pieghevole si trova sul lato sinistro, quindi il separé si ripiega a destra dell'attacco a parete. **(B)** Per non occupare spazio inutilmente, ad es. presso il telaio di una porta, il separé può essere ordinato con l'attacco in posizione speculare.

A



B

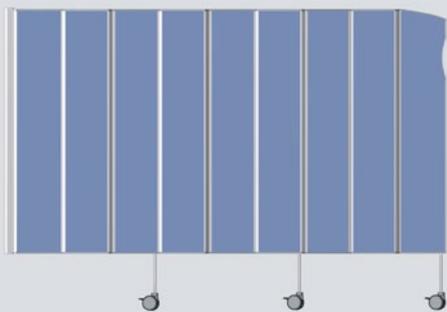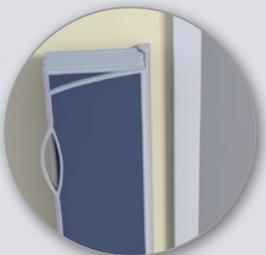


SEPARÉ COLORATO




DAYLIGHT TOP

La sezione superiore è alta circa 0,3–0,4 m, a seconda dell'altezza del pannello selezionato.

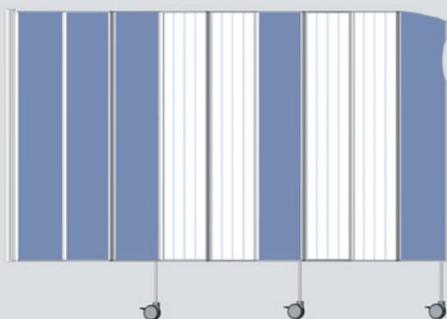

DAYLIGHT DUO

Le sezioni satinare sono abbinate a coppie.

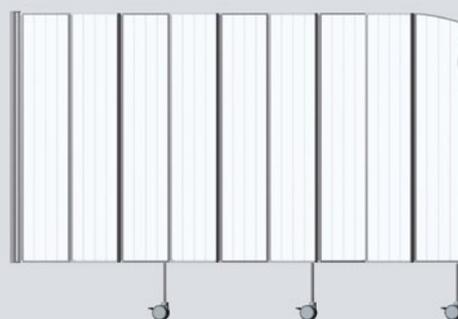


DAYLIGHT

Colori e motivi



*Per maggiori informazioni, fate riferimento alla brochure separata o visitate il nostro sito web.

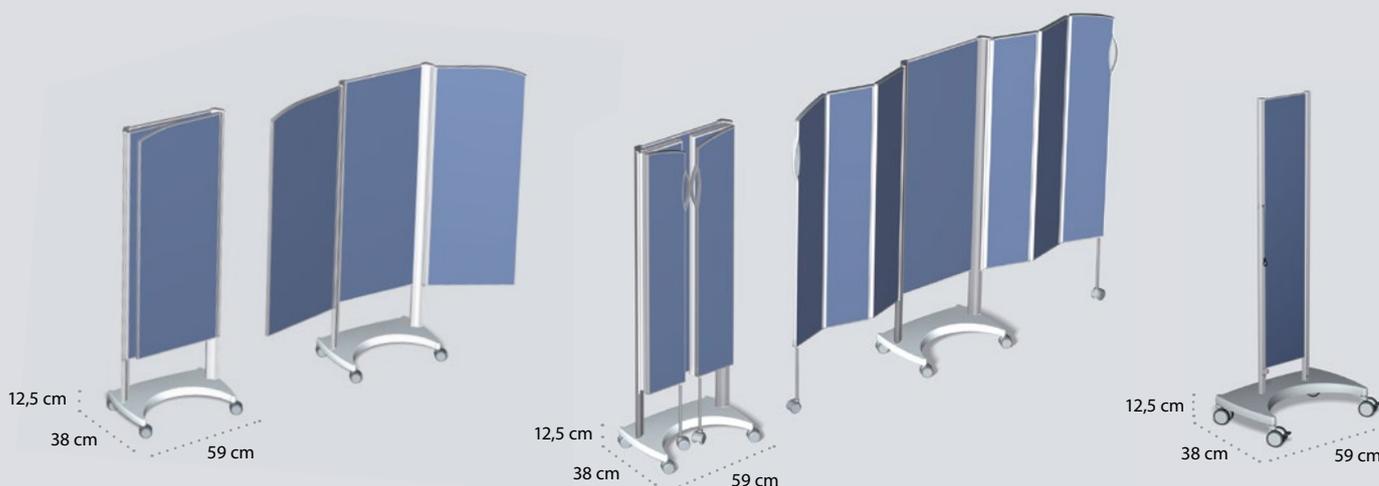

SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 1,5 M

Cod. 6522, altezza 1,55 m
Cod. 6523, altezza 1,85 m

Larghezza aperto 1,5 m, larghezza ripiegato 0,55 m. Progettato per le situazioni che richiedono un separé indipendente, ad es. negli spazi adibiti a spogliatoio o ai piedi del letto. La struttura compatta delle ruote permette di risparmiare spazio prezioso a pavimento e l'altezza ridotta riduce il rischio di ribaltamento.

SEPARÉ A MONTANTE SILENTIA DA 2,0 M

Cod. 6525, altezza 1,55 m
Cod. 6526, altezza 1,85 m

Larghezza aperto 2,0 m, larghezza ripiegato 0,55 m. Protegge dagli sguardi indiscreti ai piedi del letto, nei corridoi o negli spazi adibiti a spogliatoio. Quando il separé è aperto, le ruote si bloccano. La struttura compatta delle ruote permette di risparmiare spazio prezioso a pavimento e l'altezza ridotta riduce il rischio di ribaltamento.

CARRELLO PER SEPARÉ

Cod. 6514, altezza 1,45 m
Cod. 6518, altezza 1,65 m
Cod. 6520, altezza 1,85 m

Accessorio per separé pieghevoli composti da max 15 sezioni. Montaggio del separé con EasyClick. **Nota:** I separé più lunghi (12-15 sezioni) sono progettati per essere disposti a L intorno al letto.

Morsetti e distanziali



MORSETTO STANDARD PER GUIDA PER TERAPIA INTENSIVA
Cod. 6502

Fissato a una guida per terapia intensiva, rappresenta una soluzione versatile che consente di spostare il separé lateralmente sulla guida. Distanza fra guida per terapia intensiva e separé: 40 mm.




DISTANZIALE 20 MM
Cod. 6506

Si utilizza per allontanare il separé dalla parete, ad es. per superare un battiscopa. Fornito a coppie.



DISTANZIALE 100 OPPURE 200 MM
Cod. 6507, 100 mm
Cod. 6508, 200 mm

Si utilizza per allontanare un separé dalla parete. Fornito a coppie.

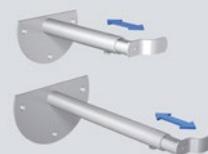

DISTANZIALE REGOLABILE
Cod. 6509, 200–350 mm
Cod. 6510, 300–500 mm

Si utilizza per allontanare maggiormente un separé dalla parete. Fornito singolarmente.



MORSETTO DI SUPPORTO
Cod. 6524

Si utilizza insieme al morsetto standard 6502 qualora vi siano due guide per terapia intensiva fissate alla parete.



MORSETTO CON DISTANZIALE
Cod. 6535

Soluzione ideale per lasciare un certo spazio fra il separé e la guida per terapia intensiva, ad es. nei reparti di dialisi, dove si deve accedere al pannello per terapie. Distanza fra guida per terapia intensiva e separé: 150 mm.



MORSETTO REGOLABILE
Cod. 6516

Compensa il disassamento fra le guide per terapia intensiva superiore e inferiore. Il morsetto è regolabile fra 0 e 150 mm. Si utilizza insieme al morsetto standard oppure al morsetto con distanziale.

Attacco a parete e montante a pavimento



ATTACCO A PARETE

Cod. 6539, altezza 1,45 m
Cod. 6544, altezza 1,65 m
Cod. 6540, altezza 1,85 m

Per un pratico montaggio diretto a parete. In genere, insieme al separé è fornito un attacco a parete. È possibile ordinare altri attacchi a parete separatamente.



ATTACCO A PARETE CON SUPPORTO A PAVIMENTO

Cod. 6537, altezza 1,45 m
Cod. 6545, altezza 1,65 m
Cod. 6538, altezza 1,85 m

Attacco a parete con supporto a pavimento per il montaggio con un morsetto.



ATTACCO A PARETE CON SUPPORTO A PAVIMENTO E PROLUNGA SUPERIORE

Cod. 6541, altezza 1,45 m
Cod. 6546, altezza 1,65 m
Cod. 6542, altezza 1,85 m

L'attacco a parete si fissa con un morsetto quando è montata una guida per terapia intensiva sopra il separé.




MONTANTE A PAVIMENTO

Cod. 6561A, altezza 1,45 m
Cod. 6562A, altezza 1,65 m
Cod. 6563A, altezza 1,85 m

Il montante a pavimento può fungere sia da supporto per un separé a parete che da punto di attacco per i separé pieghevoli. Il montante deve essere avvitato al pavimento. Altre versioni sono riportate a pag. 7.

Misure importanti

I separé pieghevoli possono essere montati direttamente a parete per mezzo di distanziali o morsetti su guide per terapia intensiva orizzontali. Il montaggio dipende dalla tipologia di ambiente. Le illustrazioni seguenti mostrano le altezze raccomandate per le guide per terapia intensiva, oltre ad altre misure utili. Contattate il vostro distributore locale per definire una soluzione ottimale.

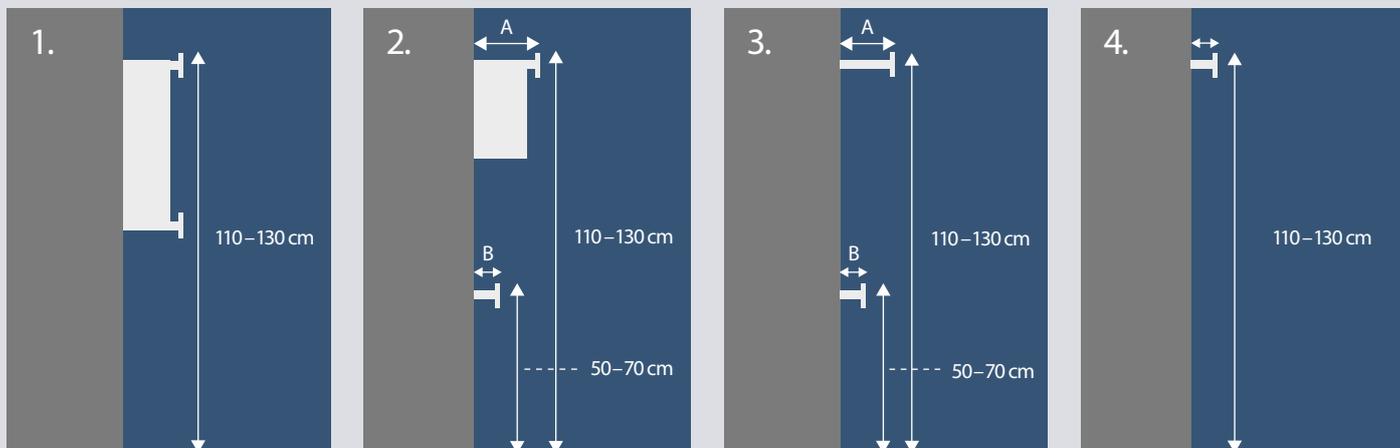

MORSETTO DI SUPPORTO (SUPERIORE)
Cod. 6524

MORSETTO STANDARD (INFERIORE)
Cod. 6502

Questa combinazione di morsetti di supporto è necessaria in caso di montaggio su 2 guide in verticale. *Per le misure importanti, vedere il numero 1.*



MORSETTO CON DISTANZIALE (SUPERIORE E INFERIORE)
Cod. 6535


Questa combinazione è necessaria qualora sia richiesto uno spazio tra guida e separé per tubi e altre attrezzature. *Per le misure importanti, vedere il numero 1.*




MORSETTO STANDARD (SUPERIORE)
Cod. 6502

MORSETTO REGOLABILE (INFERIORE)
Cod. 6516

Questa combinazione di morsetti di supporto è necessaria in caso di montaggio su 1 guida più vicina alla parete rispetto all'altra. *Per le misure importanti, vedere il numero 2 e 3.*

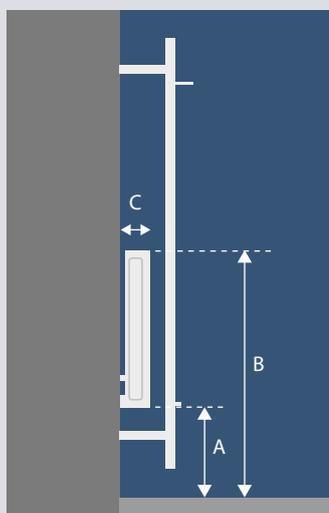

MONTAGGIO DAVANTI A UN RADIATORE CON DISTANZIALE A PARETE

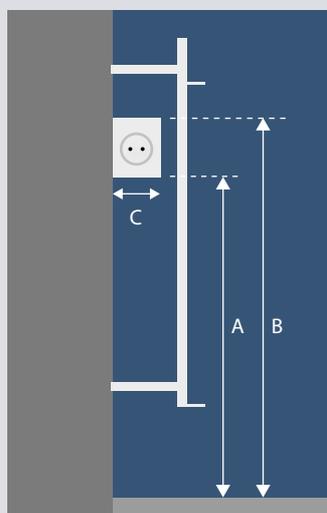

MONTAGGIO DAVANTI A UNA PRESA ELETTRICA CON DISTANZIALE A PARETE

In caso di montaggio di un separé pieghevole davanti a un radiatore oppure a una presa elettrica, è importante specificare le seguenti misure in sede di ordinazione.

- A. _____
- B. _____
- C. _____

Visitate il nostro sito web per maggiori informazioni su montaggio e accessori

